

ချွေးပေါက်မှာပိတ်နေတဲ့ အဆီတွေအညစ်အကြေးတွေ Dead Cell တွေကို ဖယ်ရှားပေးလို့ ဆားဝက်ခြံတွေကို ဖြစ်ပြီးသားရော နောက်မ ဖြစ်အောင်ရော ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။

ULTRASONIC SKIN SCRUBBER အသုံးပြုပုံ

အားသွင်းသုံးရပါမည်။

အားပြည့်ရန် ၄နာရီခန့်အားသွင်းရမည်။(အားသွင်းနေချိန် မီးလုံး လေးတွေ ရွှေ့နေပြီး အားပြည့်ချိန် မီးလုံးလေးတွေ တန်းသွားပါမယ်)
အားပြည့်ပြီးလျှင် ၁နာရီခွဲလောက် အသုံးခံပါသည်။

- 1 Power buttonကို 3စက္ကန့်နှိပ်၍ ဖွင့်ပါ ။
- 2 Cleansing, moisturizing & liftingစတဲ့ modeခုပါဝင်ပါတယ်။
- 3 Functionရွေးရန်အတွက် power buttonကို တစ်ချက်စီနှိပ်၍ ရွေးနိုင်ပါတယ်။

- 4 Cleansing moodမသုံးခင် မျက်နှာမှာ အစိုဓာတ်ရှိနေရပါမယ်။ water sprayဖြန်းတာ၊ Aloe Vera gelလိမ်းတာရပါတယ်။ Cleansing moodနဲ့ မျက်နှာအနှံ့ပြုလုပ်ပါ။

scrubber head down for cleansing mood
စက်ခေါင်း အောက်စိုက်တဲ့အနေအထားနဲ့ သုံးပေးပါ။

- 5 Cleansing moodလုပ်ပြီး မျက်နှာကို Tissueနှင့်သန့်စင်ပြီး Serum,moisturizerတစ်ခုလိမ်းပါ။

- 6 Moisturizing moodနဲ့ မျက်နှာအနှံ့ဆက်လုပ်ပါ။

- 7 Lifting moodနဲ့ မျက်နှာအနှံ့ဆက်လက်ပြုလုပ်ပါ။


scrubber head up for moisturizing and lifting mood
စက်ခေါင်းအပေါ်လှန်ထားတဲ့အနေအထားတဲ့ ပင့်တင့်တဲ့ပုံစံဖြင့်သုံးပေးပါ။

- 8 အချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ။ မျက်နှာအနှံ့လုပ်ရင်ရပါပြီ။


- 9 အသုံးပြုပြီး wet tissueဖြင့် စင်ကြယ်အောင်သုတ်ပေးပါ။

- 10 သုံးပြီးPower buttonကို ၃စက္ကန့်နှိပ်၍ပိတ်ပါ။
*တစ်ပတ်ကို ၂ကြိမ် ၃ကြိမ်ခန့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Sensitive Skinများ တစ်ပတ်၁ကြိမ်သာသုံးပေးပါ။

- 11 အလွန်အကျွံမိပြီး သုံးစရာမလိုပါဘူး။ စက်သုံးပြီးချိန် အသားအနည်းငယ်နီတာ ပုံမှန်ပါပဲ Moisturizerလိမ်းပေးပါ။
ယောင်ယမ်းဝက်ခြံရှိတဲ့နေရာတွေရှောင်သုံးပေးပါ။

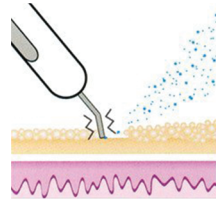

**SCRUBBER HEAD DOWN
FOR CLEANSING MOOD**

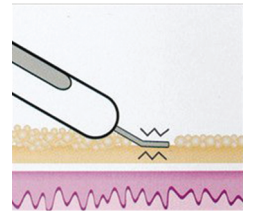

**SCRUBBER HEAD UP FOR
MOISTURIZING AND LIFTING MOOD**

အသုံးပြုနည်း video
ကြည့်ရန်-scan ဖတ်ပါ



*** ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်၊ ဓမ္မတာလာနေချိန်၊ ၆လအောက်
ကလေးရှိသော နို့တိုက်မိခင်၊ နှလုံးရောဂါရှိသူ ကင်ဆာရော
ဂါရှိသူ Serious Skin Allergy ပြဿနာရှိသူတွေနဲ့ ဖျား
နာနေမကောင်းဖြစ်နေချိန်တွေမှာ မသုံးသင့်ပါဘူး။
(အသားအရေက အဲ့လိုအချိန်တွေမှာ ပုံမှန်ထက်ထိခိုက်လွယ်
တဲ့အတွက် ရှောင်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်)***

WARRANTY

CUSTOMER NAME : _____

PHONE NUMBER : _____

SERIAL NUMBER : _____

PURCHASED DATE : _____

Terms and Conditions

- This product is guaranteed 6 months from the purchased date.
- It is applicable to the original purchaser only and is not transferrable to the third-party users.
- This warranty covers any manufacturing defects and defects arising from normal usage.
- This warranty does not cover damage or error caused by accident, misuse, modification, faulty installation.
- Warranty is void if repairing without our consent or serial number has been removed.
- Customer need to present the warranty card together with invoice to claim the warranty service. Failing which R&P - International Company reserve the right to decline any warranty claim.
- This warranty card will not be reissued in the event of loss.

R&P
REVERSE
& PREVUNT

ULTRASONIC SKIN SCRUBBER

User Manual



“ အလှအပရောရာဝန်ထောက်ရုံးနှင့် **Customer Review** အများဆုံးရထားတဲ့
N0-1 R&P Beauty Devices ”